

froggy mouth 

Corectează funcția de deglutiție și  
postura limbii în repaus în doar 15  
minute pe zi

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU  
PACIENȚI TINERI**



## Vi s-a prescris un dispozitiv FroggyMouth

Acest dispozitiv corectează tiparul de deglutiție sau înghițire prin crearea unui nou model: în timpul deglutiției sau înghițirii, dinții intră ușor în contact și limba apasă pe cerul gurii.



Specialistul dumneavoastră v-a oferit un dispozitiv FroggyMouth




Dezvățați-vă de obiceiurile vicioase



Cu o abordare foarte simplă



În doar 15 minute pe zi în timp ce vă uitați la televizor

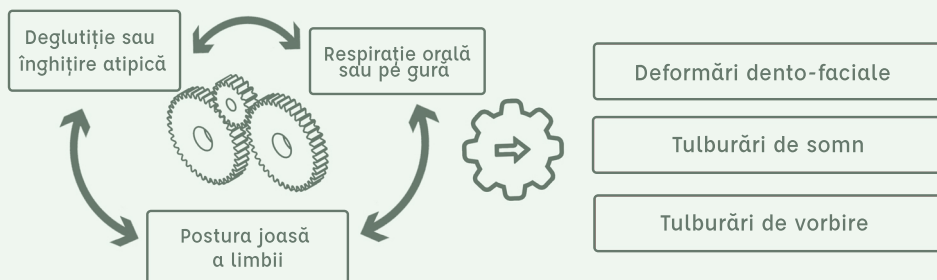

Toate aceste condiții clinice au un lucru în comun : sunt legate de postura limbii.

De fapt 40% din populație prezintă o poziționare incorectă a limbii pe palat, obicei care poate persista chiar și după erupția primilor molari. Acest aspect de funcționare anormală a limbii are ca și consecințe perturbarea funcțiilor oro-faciale care la rândul lor au un impact asupra creșterii și dezvoltării optime ale unui copil.

Prin corectarea disfuncției deglutiției se obține

- ⌚ Reducerea duratei tratamentului (de ex: ortodontic)
- ↑ Imbunătățirea calității rezultatelor
- ☆ Reducerea riscului de recidivă post tratament ortodontic



## Cum funcționează FroggyMouth

FroggyMouth trebuie purtat 15 minute pe zi , în fața unui televizor.În timp ce copilul poartă dispozitivul, modelul de deglutiție se schimbă automat fără a perturba calitatea somnului ceea ce este foarte important pentru copii.

Este obligatoriu să respectați cu exactitate instrucțiunile de utilizare a dispozitivului FroggyMouth



Purtați-l o dată sau de două ori pe zi timp de 15 minute pentru a dezvolta rapid și eficient un nou tipar de deglutiție. Rutina este esențială.



Purtați-l în fața unui ecran TV sau al unui computer ridicat la nivelul feței .Evitați orice poziție cu capul aplecat.



Atenția pacientului trebuie să fie asupra ecranului astfel încât noul tipar de deglutiție să se automatizeze și să devină natural.



## Cum se poartă FroggyMouth?



## Cum imi ajut copilul?

Dacă observați un tipar de înghițire incorect la copilul dumneavoastră, de exemplu cu bărbia și buzele contractate, arătați-i acest aspect într-o oglindă, astfel încât să devină conștient.

### 3 Lucruri cheie de reținut



Este normal să simțiți o creștere a volumului de salivă când purtați dispozitivul, în special în primele zile de utilizare. Dacă aceasta durează mai mult de 10 zile informați-vă specialistul.



Trebuie să purtați dispozitivul ÎN FIECARE ZI fără excepție.



Dacă îndepărtați dispozitivul în timpul perioadei de 15 minute, reluați procesul de la capăt.

### Curățarea dispozitivului



Curățați-l cu periuța de dinți și pastă de dinti sau cu apă de gură fără alcool. Uscați-l complet și puneți-l înapoi în cutia sa.

**Vă rugăm să urmați recomandările specialistului dumneavoastră !**

Froggy Mouth este un dispozitiv medical fabricat 100% în Franța.

Nu conține latex sau ftalați și este certificat CE și FDA.

Toate dispozitivele noastre sunt ambalate în WISE (Work Integration Social Enterprise).

Vă rugăm să ne adresați orice întrebări și să ne împărtășiți experiența dumneavoastră pe Facebook sau prin e-mail aici:

**[contact@froggy Mouth.ro](mailto:contact@froggy Mouth.ro)**

Pentru mai multe informații despre cum funcționează acest dispozitiv, vizitați: **[www.froggy Mouth.ro](http://www.froggy Mouth.ro)**